
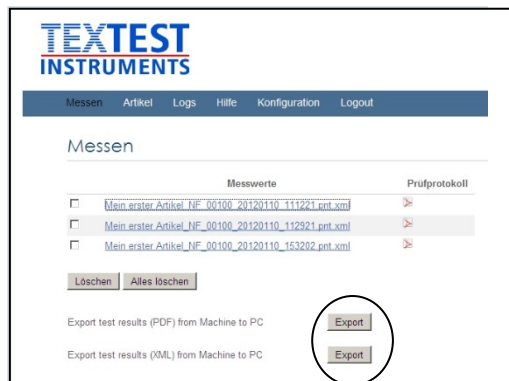


FX 3300-IV Tausch der Hauptsteuerung mit Display FX 3300-IV Exchange of PCB Main control with display 11/2020, NF

DEUTSCH

- Die Steuerelektronik wird vorprogrammiert mit den Kalibrierdaten und Seriennummer angeliefert. Falls Ihr Gerät mit der optionalen Auswertesoftware ausgestattet ist, so wird dringend empfohlen, vor dem Tausch die gespeicherten Messwerte und Artikel auf Ihrem PC zu sichern. Die Artikel können nach dem Tausch wieder in das Gerät kopiert werden.

Über Web-Interface:

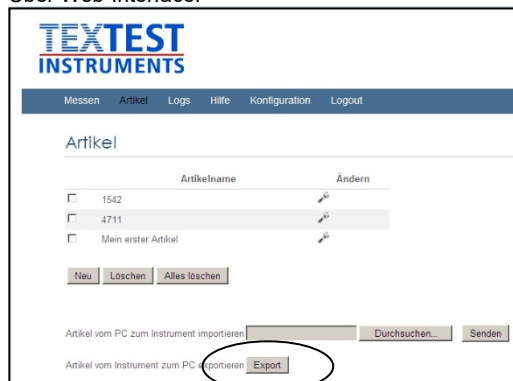

- Schalten Sie danach das Gerät am Hauptschalter aus und entfernen Sie die Abdeckhaube. Falls das Gerät mit dem optionalen Streifendrucker ausgestattet ist, so stecken Sie das Verbindungskabel zum Drucker an der Steuerelektronik aus.




Entfernen Sie auf jeder Seite 3 Befestigungsschrauben

- Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Steuerelektronik und ziehen Sie die Steuerelektronik nach **oben** weg.





4. Stecken Sie alle Kabel aus und montieren Sie die neue Steuerelektronik in umgekehrter Reihenfolge.

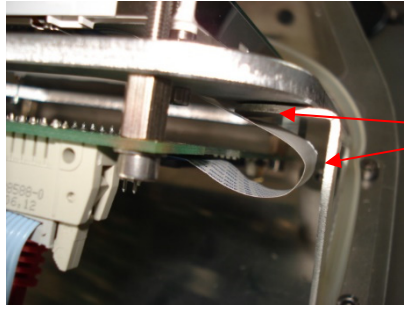

Das Flachkabel darf nicht eingeklemmt werden!!

ENGLISH

1. The control board is being supplied with configured calibration data and serial number. In case your instrument is equipped with the optional evaluation software, it is strongly recommended to save all test results and styles on your PC. After the change of the board, the styles can be imported to the instrument.

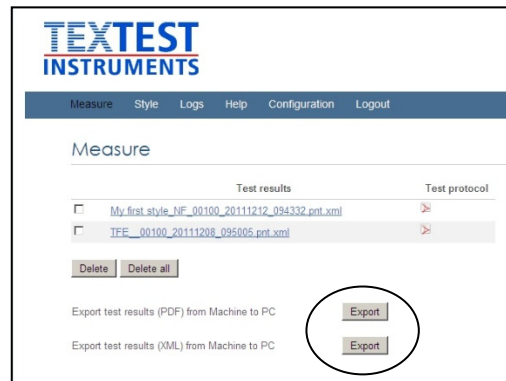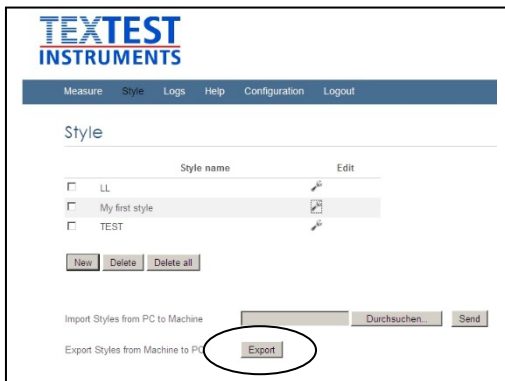

2. Switch off the instrument and remove the cover from the instrument. In case your instrument is equipped with the optional strip printer, unplug the connecting cable on the main board.



3. Remove the 2 mounting screws for the control board and gently move the control board **upwards**.



4. Disconnect all cables and install the new main board in reverse order.

