


## FX 3300-IV: Instruktionen für die Reinigung des Klinkenmechanismus

### FX 3300-IV: Cleaning instructions for latch assembly

07/2016, NF


#### DEUTSCH

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus.
2. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Hierzu müssen an der linken sowie rechten Seite jeweils 3 Stk. Inbussschrauben gelöst werden. Falls Ihr Gerät mit einem Streifendrucker ausgestattet ist, müssen die beiden Verbindungskabel am Drucker ausgezogen werden.
3. Entfernen Sie die rechte und linke hintere Seitenabdeckung. Hierzu müssen jeweils 2 Schnellverschlusschrauben gelöst werden.
4. Ziehen Sie den Stecker für die Magnetspule aus:

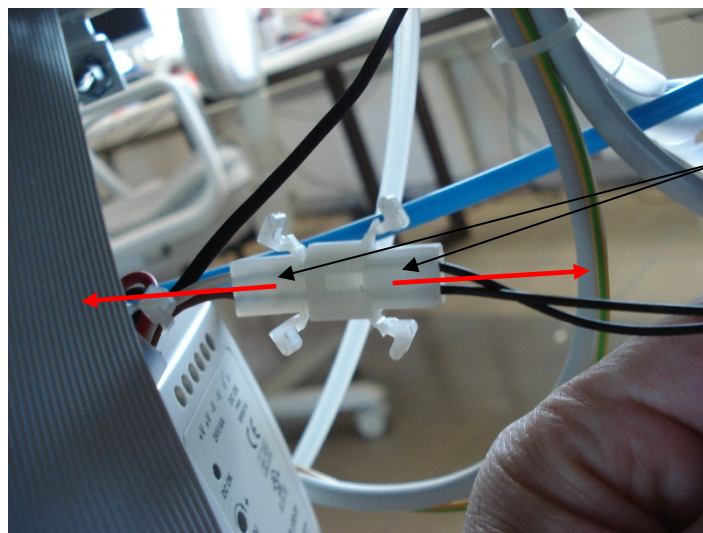

Nicht an den  
Kabel ziehen!  
Halten Sie die  
Steckergehäuse.

5. Lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben für die Magnetspule. Achtung: Halten Sie beim Lösen der letzten Schraube unbedingt die Magnetspule, da sie sonst herunterfällt.

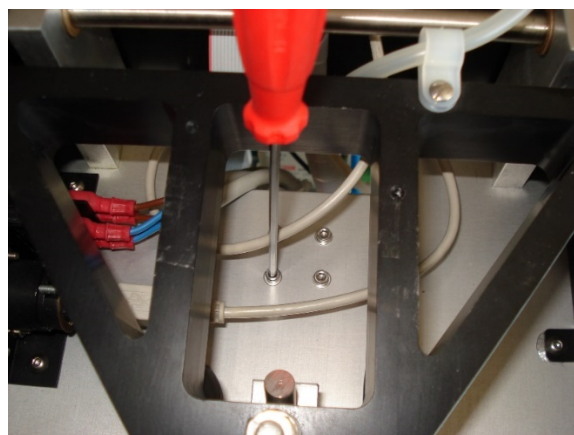




6. Lösen Sie die 3 Befestigungsschrauben für den Klinkenmechanismus. Entfernen Sie den Klinkenmechanismus, indem sie die Einheit um 90° abdrehen.




7. Reingen Sie den Magnetanker sowie die Ankerführung im Innern der Magnetspule mit Azeton oder ähnlich.

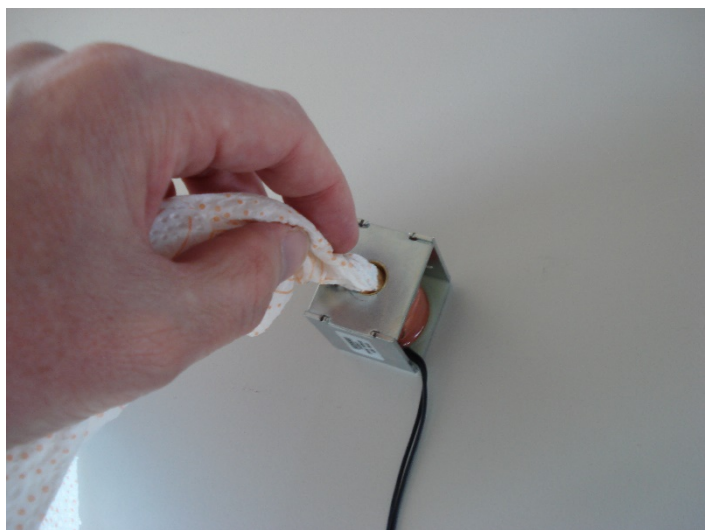





8. Kontrollieren Sie den Klinkenmechanismus auf Leichtgängigkeit. Bringen Sie allenfalls 1 – 2 Tropfen Nähmaschinenöl an die beweglichen Verbindungsstellen an.

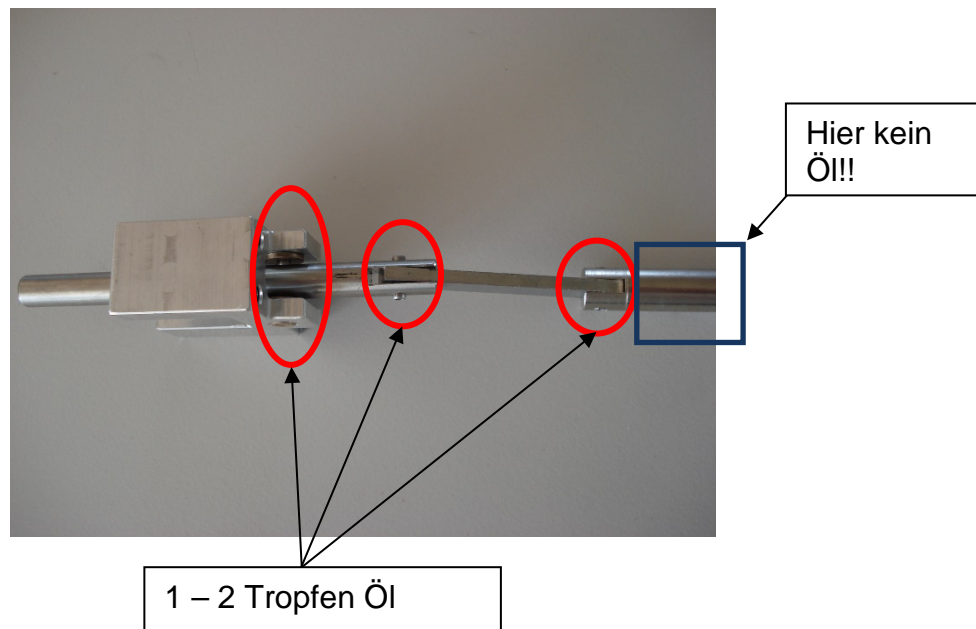


9. Montieren Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge.




## ENGLISH

1. Disconnect the instrument from power line.
2. Remove the top plastic cover by unlocking on each side 3 mounting screws. Disconnect the printer cable in case your instrument is equipped with a strip printer.
3. Remove the rear left and right side panel (2 fast lock screws on each panel).
4. Disconnect the cable of the solenoid:

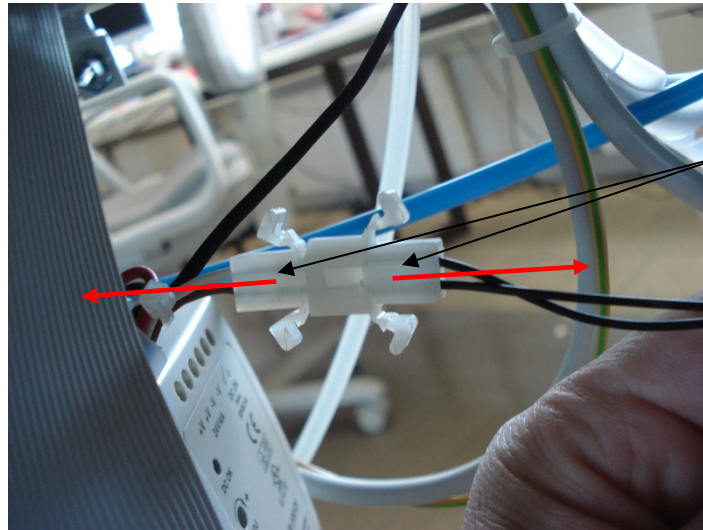

5. Unlock the mounting screws of the solenoid. Caution: While unlocking the last screw, make sure to hold the solenoid in order to avoid dropping it.

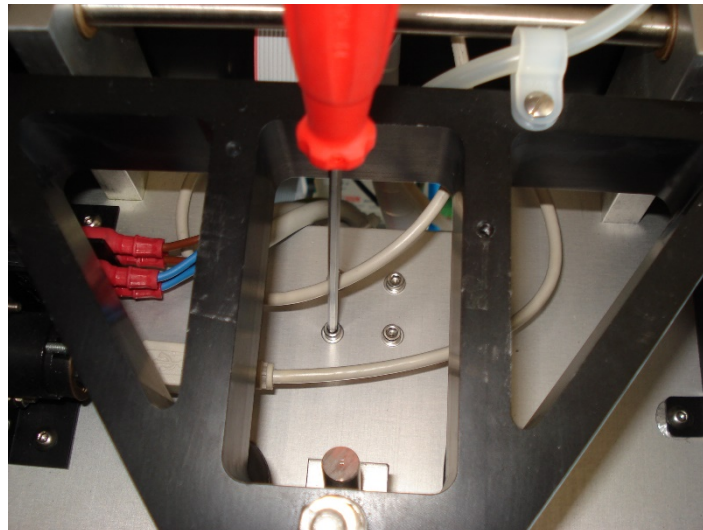




6. Remove the 3 mounting screws of the latch assembly. Remove the assembly by twisting it 90°.




7. Clean the plunger and inside of coil body. Use acetone similar.

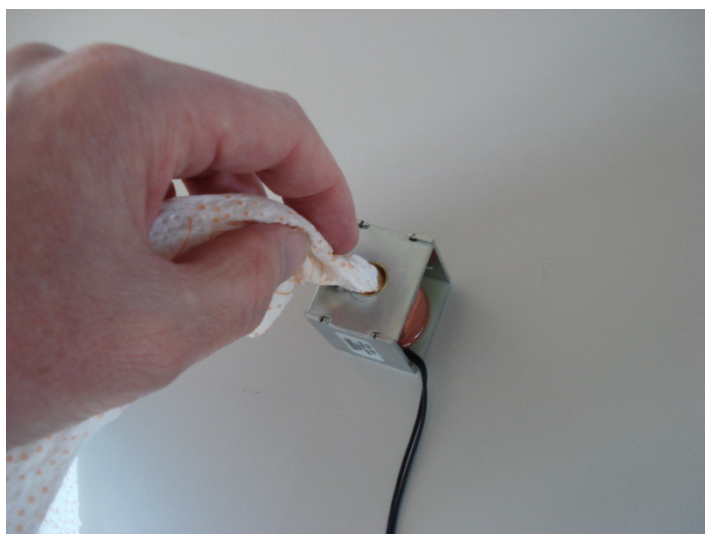





8. Check the latch assembly for ease of motion. If required, apply 1 – 2 drops of sewing oil on the joints.

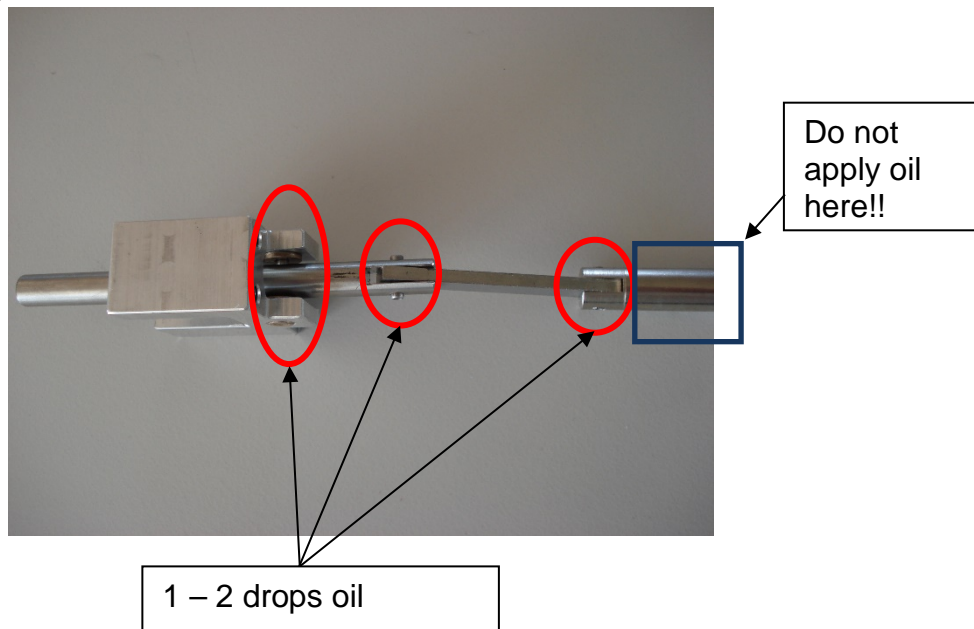

9. Mount all parts in reverse order.